



Catálogo General Oftalmología / Cirugía Ocular

Ergonomía. Confort.
Made in Germany.

Bienvenido a BRUMABA

Calidad de confianza para tu salud

Como empresa familiar, nos especializamos en el desarrollo y producción de camillas quirúrgicas ergonómicas, sillas y taburetes. Al proporcionar productos innovadores y de alta calidad, nuestro objetivo es mejorar la salud y el bienestar de los médicos profesionales y pacientes en todo el mundo.

Nuestras mesas, sillas y taburetes quirúrgicos son los compañeros perfectos para el oftalmólogo, asegurando una cirugía cómoda y rentable. Con nuestros productos, los cirujanos pueden trabajar relajada y eficientemente mientras brindan un cuidado y comodidad óptimos para sus pacientes.

En BRUMABA valoramos la sostenibilidad: Nuestros productos han sido fabricados en nuestra casa al sur de Alemania desde 1980. Usamos solo los materiales y tecnología de más alta calidad, asegurando que nuestros productos ofrezcan una larga vida útil.

Experimente por sí mismo nuestra vanguardia en ergonomía, comodidad, fiabilidad y eficiencia.

BRUMABA - ¡su socio ideal para un futuro saludable!



MADE IN GERMANY



SINCE 1980



Mesa de operaciones
GENIUS EYE



Sillón quirúrgico
THRONUS T3



Mesa de operaciones
GENIUS EYE PRO

Organización operativa moderna

Mejore la eficiencia de su quirófano y comodidad del paciente



Las instalaciones médicas a menudo enfrentan el desafío de tratar a más pacientes en intervalos más cortos, al mismo tiempo que se encuentra con la presión financiera de la gerencia de quirófano. Para abordar este dilema, nuestro sistema de rotación BRUMABA ofrece una solución moderna e inteligente que mejora tanto la eficiencia como la comodidad del paciente.

El cirujano puede operar a un paciente en un posición ergonómicamente cómoda mientras el asistente prepara simultáneamente el siguiente paciente para cirugía. El paciente previamente operado se traslada sin esfuerzo a la habitación de recuperación y es colocado en una posición relajada con tan solo pulsar un botón. Esta transición perfecta no solo ahorra tiempo sino que también mejora la atención al paciente

1



Acceso cómodo

2



Transporte de
pacientes cómodo
para la espalda

3



Preparación
preoperatoria

4



Operación
ergonómica

5



Posicionamiento
postoperatorio
cómodo

6



Salida segura

BRUMABA Rotación Sistema

Cada paciente permanece cómodamente en la camilla durante todo el procedimiento quirúrgico, lo que finalmente simplifica todo el proceso para su negocio, su personal y lo más importante, sus pacientes.




Sillón quirúrgico
BALANCE ADVANCE

Tus ventajas con BRUMABA

Inspirado en la experiencia práctica,
ideal para uso clínico

Durante más de cuatro décadas, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con los cirujanos y el personal de quirófano, permitiéndonos ofrecer ventajas significativas que hacen que los equipos BRUMABA sean la elección perfecta para ti

- Los productos están especialmente diseñados para los desafíos de la cirugía oftalmológica.
- Al utilizar nuestras mesas y sillas de operaciones, usted y su equipo trabaja en una postura ergonómica en todo momento.
- A lo largo de todo el proceso quirúrgico sus pacientes podrán beneficiarse de un posicionamiento cómodo y profesional, independientemente de su altura y peso.

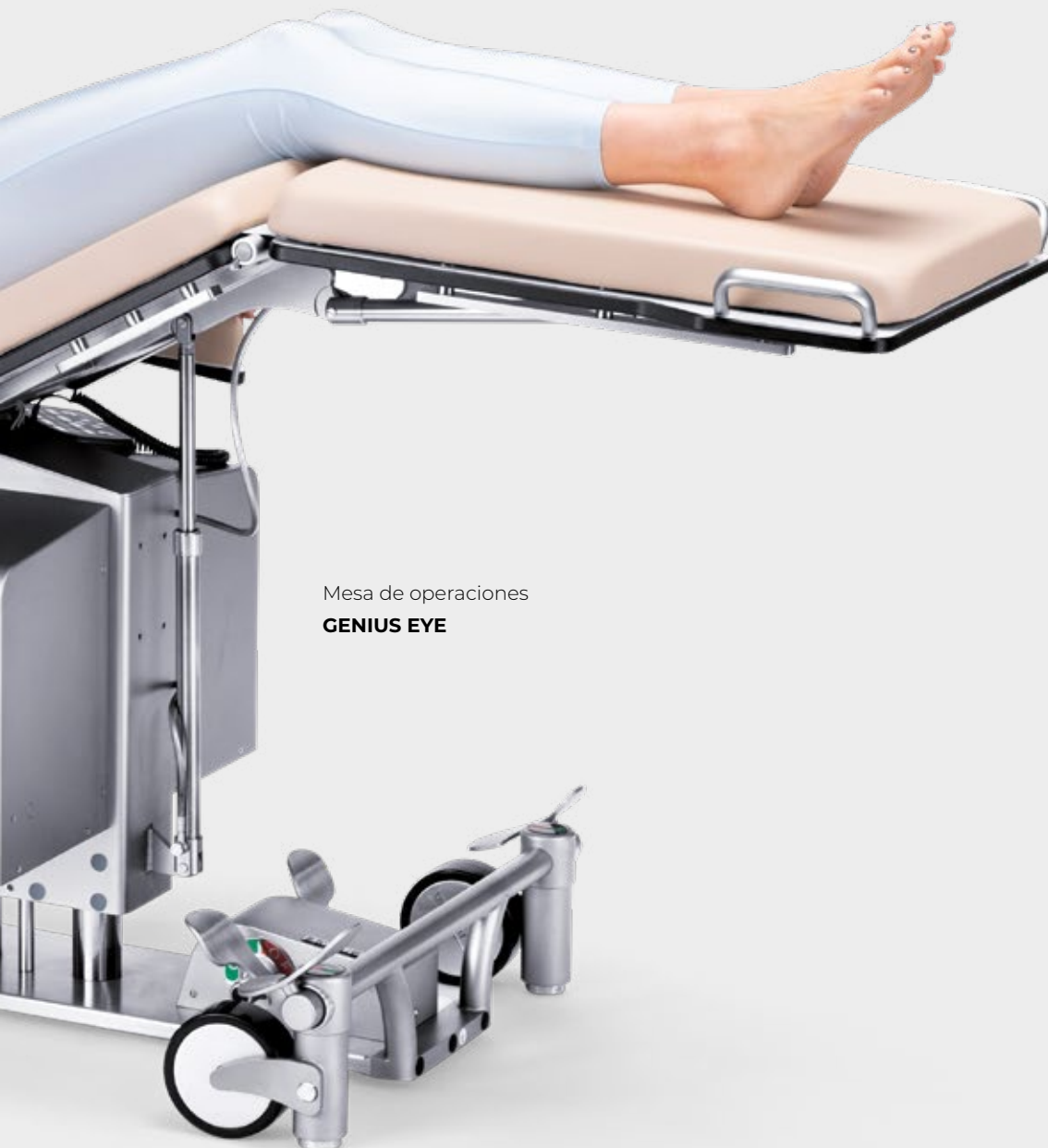

Mesa de operaciones
GENIUS EYE

Mesas de operaciones BRUMABA para oftalmología

Ergonómico. Móvil. Flexible

Con GENIUS EYE y GENIUS EYE PRO, BRUMABA ha desarrollado dos mesas de operaciones para abordar los desafíos específicos de la cirugía oftalmológica.

Características sobresalientes de las mesas de operaciones BRUMABA

- El diseño compacto proporciona un acceso óptimo y un amplio espacio para las piernas, asegurando que las cirugías se pueden realizar con precisión y comodidad
- Las mesas cuentan con una batería de una impresionante duración de 1-2 semanas por carga, haciéndolas increíblemente fiables para intervenciones quirúrgicas prolongadas.
- La capacidad máxima de 250 kg / 550 lbs y la extensión de la sección trasera del respaldo proporciona condiciones adecuadas óptimas para cualquier paciente, independientemente de su tamaño o necesidades médicas
- Los trenes de rodaje profesionales permiten fácil movimiento con una sola persona
- Prácticos mangos de empuje para transporte ergonómico
- Función de memoria que ahorra tiempo que permite guardar hasta 8 posiciones de uso frecuente, agilizando el proceso quirúrgico y reduciendo el tiempo total del procedimiento



Reposacabezas ajustable intraoperatoriamente

El reposacabezas ajustable tridimensionalmente con estructura de carbono asegura el posicionamiento estable y cómodo de la cabeza del paciente.



Opciones de ajuste individuales con solo presionar un botón

Las mesas de operaciones se pueden ajustar individualmente desde la posición acostada hasta la posición sentada y tienen útiles funciones de memoria.



Mesa de operaciones **GENIUS EYE**

El ojo perfectamente a la vista

Características destacadas

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza estabilidad y durabilidad "Made in Germany"
- Función de memoria que le permite guardar hasta 8 posiciones de descanso utilizadas con frecuencia, lo que mejora la eficiencia operativa
- Batería de larga duración de 1 a 2 semanas, lo que garantiza un rendimiento confiable
- Equipado con ruedas 4-EASY DRIVE que ajustan automáticamente la dirección, lo que facilita el transporte en distancias cortas
- Altura regulable con columna telescópica ST (580-870 mm)
- Hasta 250 kg / 550 lbs de peso del paciente con pleno rendimiento

Equipamiento opcional

- Amplio ajuste de altura con doble columna telescópica DT (520-950 mm)
- La función 5-WHEEL DRIVE garantiza la máxima movilidad, con una rueda adicional para un movimiento preciso en pasillos largos y esquinas estrechas



Escanea el código QR para ver la GENIUS EYE en acción en el video del producto!



Reposacabezas regulable tridimensionalmente



Pedal de control opcional:
El cirujano puede realizar ajustes intraoperatorios sin comprometer la esterilidad.





Reposabrazos integrados para facilitar el posicionamiento de los brazos



Datos técnicos

Longitud total	1,795 - 1,983 mm
Anchura total	767 mm
Peso neto DTA	160 kg
Peso neto STA	140 kg
Carga max.	250 kg
Altura (con acolchado)	580 - 870 mm
Inclinación de la cabeza	25° a -45°
Inclinación del respaldo	80° a -22°
ST inclinación del asiento	39° a -9°
DT inclinación del asiento	35° a -9°
ST inclinación del reposapiés	28° a -74°
DT inclinación del reposapiés	28° a -90°

ART. NO. Y1.01.12 GENIUS EYE STA
ART. NO. Y1.02.23 GENIUS EYE DTA

Mesa de operaciones **GENIUS EYE PRO**

La profesional para oftalmología

Características destacadas

- Los pacientes disfrutan de una posición cómoda y relajada gracias a los reposabrazos ajustables
- Acolchado extragrueso para proporcionar a sus pacientes mayor comodidad
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza estabilidad y durabilidad "Made in Germany"
- Función de memoria que le permite guardar hasta 8 posiciones utilizadas con frecuencia, lo que mejora la eficiencia operativa
- Batería de larga duración de 1 a 2 semanas, lo que garantiza un rendimiento confiable
- Equipado con ruedas 4-EASY DRIVE que ajustan automáticamente la dirección, lo que facilita el transporte en distancias cortas
- Altura regulable con columna telescópica ST (595 - 885 mm on acolchado)
- Hasta 250 kg / 550 lbs de peso del paciente con pleno rendimiento

Equipamiento opcional

- Amplio ajuste de altura con doble columna telescópica DT 535-965 mm (con acolchado)
- La función 5-WHEEL DRIVE garantiza la máxima movilidad, con una rueda adicional para un movimiento preciso en pasillos largos y esquinas estrechas



Escanea el código QR para ver la GENIUS EYE PRO en acción en el video del producto!



Acolchado extragrueso para máxima comodidad del paciente



Posicionamiento del brazo relajada y profesional



Ajuste flexible del reposabrazos



Railes de montaje extra para accesorios adicionales

Datos técnicos

Longitud total	1,795 - 1,983 mm
Anchura total	590 mm
Peso neto DTA	160 kg
Peso neto STA	140 kg
Carga max.	250 kg
Altura (con acolchado)	595 - 885 mm
Inclinación de la cabeza	25° a -45°
Inclinación del respaldo	80° a -22°
ST inclinación del asiento	39° a -9°
DT inclinación del asiento	35° a -9°
ST inclinación del reposapiés	28° a -74°
DT inclinación del reposapiés	28° a -90°

ART. NO. Y1.01.12 GENIUS EYE PRO STA
 ART. NO. Y1.02.23 GENIUS EYE PRO DTA

Elementos de control para mesas de operaciones

Manual intuitivo y pedal de control



Control manual

Con 8 memorias

ART. NO. Z1.118



Control de pie con soporte de sujeción

- ART. NO. Z1.185 Pedal de control tipo IV con memoria 8 posiciones
- ART. NO. Z1.271 Pedal tipo IV - EYE sin función de memoria ni ajuste de piernas
- ART. NO. Z1.274 Plataforma para pedal de control tipo IV



Control de pie en el tren de rodaje con ruedas giratorias

- ART. NO. Z1.225 Pedal de control tipo IV con 8 posiciones de memoria
- ART. NO. Z1.226 Mando de pie tipo IV - EYE sin función de memoria ni ajuste de piernas

Trenes de rodaje para mesas de operaciones

Nuestra tracción en las 4 o 5 ruedas asegura estabilidad y maximiza la movilidad



4-EASY DRIVE

- 4 ruedas giratorias con ejes de conexión
- Sistema de freno de elevación para máxima estabilidad
- Control direccional inteligente
- Máximo espacio para las piernas
- Ruedas de 120 mm de fácil marcha

ART. NO. F1.403



5-WHEEL DRIVE

- Quinta rueda selectiva para un movimiento fácil y preciso en pasillos largos y en esquinas estrechas
- Sistema de freno de elevación para máxima estabilidad
- Máximo espacio para las piernas
- Ruedas de 120 mm de fácil marcha

ART. NO. F1.504

Accesorios para mesas de operaciones

Extras BRUMABA para mayor funcionalidad y confort

Mesa con ruedas para instrumental

- Colocación de instrumentos al alcance de la mano
- Ruedas dobles higiénicas y de marcha suave
- Ajuste de altura con una sola mano a través de un resorte de gas
- Altura ajustable de 860 a 1100 mm
- Frenos integrados



ART. NO. Z1.172 Tamaño del plato 600x400 mm

ART. NO. Z1.282 Tamaño del plato 700x500 mm



Reposabrazos con correa de sujeción

ART. NO. Z1.001



Reposabrazos con correa de sujeción y ajuste longitudinal

ART. NO. Z1.331



Soporte lateral con correa de sujeción

ART. NO. Z1.002



Soporte de infusión

ART. NO. Z1.277

Soporte para control manual en el soporte de infusión

ART. NO. Z1.243



Soporte flexible para control remoto

ART. NO. Z1.149



Extensión para el respaldo

ART. NO. Z1.279



Arco para microcirugía EYE

ART. NO. Z1.257



Cuadro anestésico flexible con bisagra

ART. NO. Z1.273



Correa abdominal de silicona con dos soportes de montaje

ART. NO. Z1.112

Cinturón de seguridad

ART. NO. Z1.342



Soporte de montaje

ART. NO. Z1.004



EasyCover
Funda para mesa de operaciones

ART. NO. Z1.138



Protección lateral con bisagras

ART. NO. Z1.187

Silla de tratamiento **ECURA**

Comodidad exclusiva y diseño elegante

Durante más de 45 años, BRUMABA ha marcado la pauta en equipos quirúrgicos. Con ECURA llevamos toda nuestra experiencia a la sala de tratamiento, combinando la calidad de confianza de BRUMABA con un diseño ergonómico que permite trabajar sin fatiga y ofrece una comodidad excepcional al cliente.

Características destacadas

- Función de memoria inteligente: el mando a distancia portátil se puede utilizar para guardar 4 posiciones reclinables de uso frecuente para una máxima eficiencia.
- Base delgada para un máximo espacio para las piernas: la base especialmente diseñada permite una mayor libertad de movimiento y garantiza una posición cómoda durante el tratamiento.
- El acolchado de espuma viscoelástica, el reposacabezas magnético y la forma ergonómica se combinan para proporcionar una experiencia reclinable especialmente cómoda y con buen soporte.
- Rápido y silencioso: el sillón reclinable se puede ajustar de forma rápida y silenciosa de forma eléctrica, tanto en altura como en posición.

Datos técnicos

Altura mínima (con acolchado)	639 mm
Altura máxima (con acolchado)	889 mm
Longitud de la mesa	1,837 mm
Ancho de superficie	660 mm
Capacidad máxima de carga	200 kg

ART. NO. E1.00.00



Control manual



Acceso cómodo



Posicionamiento ideal



Trabajo ergonómico

Ubicación conveniente



Control de pie

Sillón de recuperación de pacientes **CADDY**

El todoterreno perfecto

El CADDY es una solución 4 en 1 que funciona como silla, sofá, camilla y silla de recuperación. Es el todoterreno perfecto que garantiza un posicionamiento seguro y cómodo del paciente, junto con un fácil transporte.

Características destacadas

- Estructura robusta fabricada en acero inoxidable de alta calidad
- Dos asas multifuncionales en el borde superior del respaldo para un empuje ergonómico y un fácil ajuste de las superficies de descanso
- Cojines cómodos
- Las posiciones de tumbado fisiológicamente ventajosas aseguran una circulación estable para sus pacientes
- Fácil transporte gracias a las ruedas de marcha especialmente suave con frenos de dirección
- Los reposabrazos plegables aseguran una entrada cómoda y un mejor acceso al paciente
- Elección de madera clara u oscura

Datos técnicos

Peso	67 kg
Dimensiones max. (An x L x A) Silla	660 x 960 x 1440 mm
Dimensiones max. (An x L x A) Tumbona	660 x 1900 x 560 mm
Dimensiones del asiento (An x L)	460 x 490 mm
Altura del asiento	560 mm
Carga max.	180 kg

ART. NO. C1.01.00



Escanea el QR y vive la experiencia CADDY en el video





Reposabrazos ajustables automáticamente en posición reclinada (Plegables)



Superficie de descanso infinitamente ajustable



Accesorios opcionales

- Compartimento para documentos (ART. NO. Z1.067)
- Ruedas delanteras, frenado direccional (ART. NO. C1.02.XX)
- Cojín reposabrazos, con rótula (ART. NO. Z1.070)
- Cinturón abdominal, silicona (ART. NO. Z1.078)
- Palanca de posición (ART. NO. C1.XX.13)
- Apoyabrazos, acolchados (ART. NO. C1.069)
- Protección anticaída, sujetable (ART. NO. Z1.077)
- Soporte de infusión (ART. NO. Z1.068)
- Bolsa de red (ART. NO. Z1.071)
- Mesa de almacenamiento, giratoria y plegable
Pequeña: 305 x 205 mm (ART. NO. Z1.073)
Grande: 550 x 320 mm (ART. NO. Z1.074)

Confortable en cualquier posición



Posición sentada



Posición Chaiselongue



Posición tumbada

Sillones quirúrgicos y taburetes BRUMABA

Invierte en tu salud

Invertir en la línea BRUMABA de sillones quirúrgicos y taburetes significa invertir en la salud y el bienestar tuyo y de tu equipo. Diseñados para ajustarse a las medidas individuales de su cuerpo, estos sillones complementan perfectamente nuestras mesas de operaciones. El diseño amigable con la espalda reduce significativamente la tensión física durante los procedimientos quirúrgicos y la asistencia, lo que lo convierte en una inversión a largo plazo en su salud y en una experiencia quirúrgica cómoda.



Las características sobresalientes de nuestros sillones quirúrgicos incluyen:

- Soporte lumbar óptimo gracias al respaldo continuamente ajustable
- Los reposabrazos se pueden configurar con precisión para brindar un soporte óptimo durante la cirugía
- El asiento ergonómico patentado garantiza una posición de asiento cómoda y segura en todo momento
- Asiento con un ángulo de inclinación ajustable individualmente que promueve una circulación sanguínea
- Saludable en las piernas · La altura del asiento también es ajustable, lo que garantiza un ángulo de $>90^\circ$ entre la parte superior del cuerpo y las piernas para una máxima comodidad



Sillón quirúrgico
THRONUS T3

Sillón de microcirugía **THRONUS T3**

Una experiencia de primera clase

Usted pasa la mayor parte de su vida en el quirófano, por lo que creemos que un equipo de alta calidad no es un lujo sino una necesidad para su trabajo. Diseñado en colaboración con cirujanos, cada detalle del THRONUS T3 se ha perfeccionado para garantizar una comodidad de asiento excepcional y ergonómicamente perfeccionada.

Con el THRONUS T3, puede disfrutar de una posición de asiento cómoda y estable que le ayude a concentrarse en su trabajo con la máxima precisión. Invertir en el sillón de microcirugía THRONUS T3 significa invertir en su éxito y bienestar profesional. Experimente la diferencia por sí mismo y siéntese siempre en primera clase con el THRONUS T3.



Reposabrazos multifuncional



Reposabrazos ajustable intraoperatoriamente



Función de memoria para programar dos alturas



Ajuste en altura electromagnético

Características destacadas

- Posiciones de trabajo y asiento optimizadas con asiento y respaldo ajustables
- Reposabrazos estables y ajustables intraoperatoriamente para un ajuste fino rápido y fácil
- Ajuste de altura electrónico con dos posiciones de memoria, activado mediante el pie
- Máxima higiene con acolchado envuelto en plástico y ruedas cubiertas
- Sistema de frenado eléctrico activado por botón - con indicador LED para un posicionamiento estable
- El diseño sólido y pesado aumenta la estabilidad
- Sistema de batería de reemplazo con un promedio de 4 días de autonomía para un funcionamiento ininterrumpido
- Fabricación de primera calidad para una mayor durabilidad

Datos técnicos

Altura min.	555 mm
Altura max.	830 mm
Longitud del asiento	400 mm
Ancho del asiento	360 mm

THRONUS T3 ART. NO. T3.00.00



Soporte para interruptor de pedal

- Para situar controles de pie externos (por ejemplo, microscopio)
- Flexiblemente extensible hacia adelante y extensible hacia un lado

ART. NO. Z1.219

Sillón quirúrgico **BALANCE ADVANCE**

La solución cómoda y ergonómica para trabajos de precisión

Fabricado en estrecha colaboración con cirujanos, el sillón quirúrgico BALANCE ADVANCE está diseñado para proporcionar la máxima comodidad y apoyo durante los procedimientos de microcirugía. Con su diseño ergonómico y su posición de trabajo óptima, esta sillón le permite trabajar con precisión y facilidad.



Disponible con y
sin freno

BALANCE ADVANCE F
ART. NO. S3.10.13.5310

BALANCE ADVANCE F&B (con freno)
ART. NO. S3.11.13.5310



Experimente una comodidad y una ergonomía inigualables

- Reposabrazos ajustables en tres direcciones con función bloqueo para relajar los músculos de hombros y brazos
- Posición de trabajo cómoda incluso durante procedimientos prolongados
- Asiento y respaldo de forma ergonómica con inclinación de asiento pate tada y cojines de alta calidad que garantizan una postura saludable al sentarse
- Fácil ajuste de altura con liberación de pie (resorte de gas)
- Chasis cómodo con ruedas antiestáticas
- Cojines sin costuras de alta calidad y ruedas cerradas para una limpieza higiénica

Datos técnicos

Altura min.	555 mm
Altura max.	745 mm
Diámetro de la base	610 mm
Longitud del asiento	460 mm
Ancho del asiento	420 mm

Sillón quirúrgico **BALANCE**

Logrando el equilibrio perfecto: Forma, función y ergonomía

BALANCE F

Características destacadas

- Asiento y respaldo adaptables al cuerpo para un soporte ergonómico
- Cojines de alta calidad para un asiento cómodo y saludable
- El diseño ergonómico del asiento promueve una circulación sanguínea saludable en las piernas, lo que le permite sentarse cómodamente durante largos períodos de tiempo
- Los cojines están perfectamente diseñados y las ruedas están cerradas, lo que permite una limpieza sin esfuerzo y garantiza una higiene impecable
- Elevación de columna opcional (100 mm) (ART. NO. E.001558)



Ajuste de altura con accionamiento de pie, ideal para trabajos estéril

Datos técnicos

Altura min.	500 mm
Altura max.	695 mm
Diámetro de la base	610 mm
Diámetro del asiento	460 mm
Ajuste flexible de altura	420 mm

BALANCE F
ART. NO. S3.10.13.501.0

BALANCE F&B (con freno)
ART. NO. S3.11.13.501.0



Freno opcional

BALANCE SUPREME F
ART. NO. S3.10.13.521.0

BALANCE SUPREME F & B (con freno)
ART. NO. S3.11.13.521.0

BALANCE SUPREME F

El BALANCE SUPREME está equipado con reposabrazos premium que son acolchados y multifuncionales.

- Los reposabrazos son ajustables en altura, longitud y se pueden mover hacia un lado, lo que brinda una experiencia de asiento cómoda y personalizable
- Seleccione el color de los cojines del reposabrazos para que coincida con la superficie del asiento

Datos técnicos

Altura min.	520 mm
Altura max.	715 mm
Diámetro de la base	610 mm
Diámetro del asiento	460 mm
Ajuste flexible de altura	420 mm

Taburete quirúrgico **COMFORT**

El todo terreno

Diseñado para permitir que el personal médico trabaje con rapidez y agilidad, este taburete maniobrable ofrece la máxima flexibilidad para un uso sin inconvenientes. Con su práctico ajuste de altura operado con el pie, los usuarios pueden alcanzar fácilmente la altura deseada mientras mantienen sus manos libres.

Características destacadas

- Cojines de asiento sin costuras para mayor comodidad y fácil limpieza, lo que garantiza una higiene óptima.
- Ruedas grandes, cerradas y antiestáticas que facilitan un trabajo rápido y ágil, manteniendo una higiene óptima
- Freno de bloqueo opcional para una posición de trabajo segura y estable
- Elevación de columna opcional de 100 mm para mayor versatilidad y ajuste de altura personalizable (ART. N.O. E.001558)



Datos técnicos

Altura min.	540 mm
Altura max.	735 mm
Diámetro de la base	610 mm
Diámetro del asiento	400 mm
Ajuste flexible de altura	510 - 710 mm



Ajuste de altura accionado por el pie, ideal para trabajar estéril



Disponibile con asiento COMFORT SWING estéril



COMFORT ASSIST H

Con respaldo giratorio de 360° para soporte ergonómico en una variedad de posiciones sentadas.

Solo disponible con regulación de altura mediante desbloqueo manual.

ART. NO. H3.10.41.103.0



Ajuste en altura del respaldo sencillo

Modelos COMFORT disponibles

COMFORT F

Ajuste de altura mediante accionamiento de pie

ART. NO. H3.10.11.100.0

COMFORT F/B

Ajuste de altura mediante accionamiento de pie y freno

ART. NO. H3.11.11.100.0



Freno opcional

COMFORT SWING F

Con asiento COMFORT SWING y ajuste de altura mediante accionamiento de pie

ART. NO. H3.10.12.100.0

COMFORT SWING F/B

Con asiento COMFORT SWING y ajuste de altura mediante accionamiento de pie, con freno

ART. NO. H3.11.12.100.0



Ajuste de altura manual

COMFORT H

Ajuste de altura manual

ART. NO. H3.10.31.100.0

COMFORT SWING H

Con asiento COMFORT SWING y ajuste de altura manual

ART. NO. H3.10.32.100.0

Cojines de alta calidad para sus necesidades de asiento

Maximiza tu comodidad e higiene

Cojines confortables viscoelásticos

Experimente lo último en relajación y comodidad con nuestros cojines viscoelásticos, diseñados para prevenir eficazmente las escaras. De principio a fin, priorizamos su comodidad y la de sus pacientes, asegurando un procedimiento fluido y relajante.




Eleve sus estándares de higiene a nuevas alturas

- Los cojines se pueden quitar fácilmente para una limpieza y desinfección rápidas
- Diseño sin costuras y resistente al agua para proporcionar una protección eficaz contra las bacterias
- Cuero artificial duradero de alta calidad
- Nuestros cojines están especialmente diseñados para cumplir con todos los requisitos de higiene de los quirófanos, garantizando la máxima seguridad y limpieza para los pacientes y el personal
- Disponible para pedidos individuales, brindando la máxima flexibilidad para sus necesidades de asientos

Da rienda suelta a tu creatividad

35+ colores de cojines vibrantes

Nuestros colores de cojines están disponibles para mesas de operaciones, taburetes, sillas y camillas de tratamiento. Esto permite que sus productos BRUMABA se integren perfectamente en sus instalaciones.

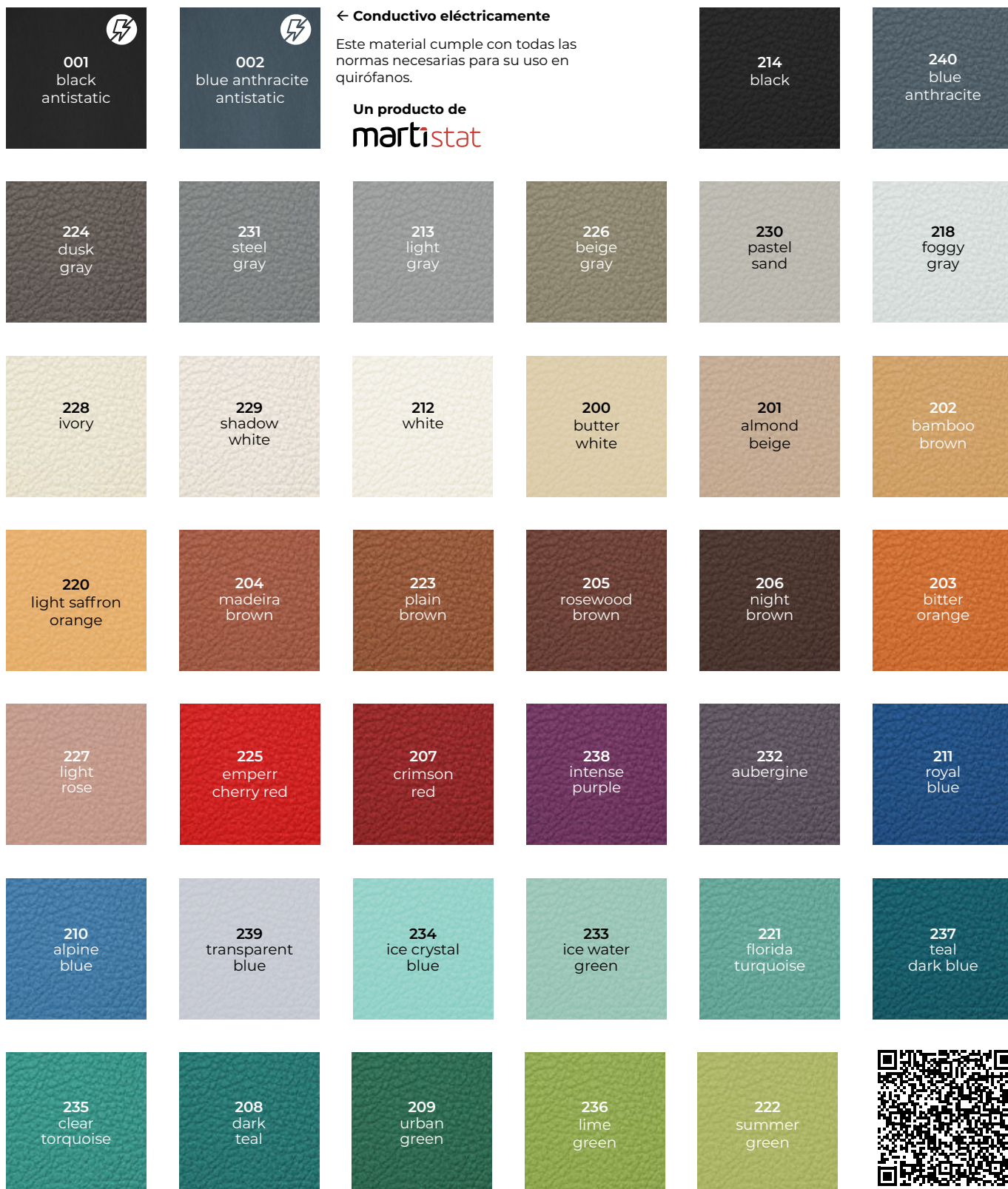

Las muestras de color pueden diferir del tono de color original.

Escanee el código QR para obtener más información.



Distribuidor exclusivo:

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V
Sucursal en España

Email: medica@topcon.com
Teléfono: +43 934 734 057

BRUMABA GmbH

Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried, Germany

Teléfono: +49 (0) 8171 / 2672 - 0
Fax: +49 (0) 8171 / 2672 - 10
Email: info@brumaba.de

MADE IN GERMANY



SINCE 1980

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

© BRUMABA GmbH
KA.0010-2025-12-08-ES

www.brumaba.com


OPERATING TABLE SYSTEMS